

veterinary technology for life

Eickemeyer®

www.eickemeyer.pl

Telefon 22 185 55 76

3M™ loban™ 2

Serweta operacyjna dla małych zwierząt do 80 kg



3M™ IOBAN™ 2 SERWETA OPERACYJNA – KOMPONENTY I CHARAKTERYSTYKA

Sterylnne pole operacyjne podczas zabiegu chirurgicznego – zmniejszone infekcji rany pooperacyjnej

To są serwety operacyjne Ioban™

Serwety operacyjne antybakteryjne Ioban™ zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia rany pooperacyjnej. Nakłada się je na skórę pacjenta w miejscu nacięcia w celu stworzenia sterylnego pola operacyjnego i uzyskania efektu antybakteryjnego podczas zabiegu chirurgicznego. Ioban™ to samoprzylepna serweta do skracania, impregnowana jodoforem, który tworzy barierę i zapewnia spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego na florę skóry pacjenta.

Rozmiar 1


- ▶ Powierzchnia klejąca (w cm): dł. 10 x szer. 20
- ▶ Wymiary (w cm): dł. 15 x szer. 20
- ▶ 10 w opakowaniu

191600

Rozmiar 2


- ▶ Powierzchnia klejąca (w cm): dł. 35 x szer. 35
- ▶ Wymiary (w cm): dł. 60 x szer. 35
- ▶ 10 w opakowaniu

191601

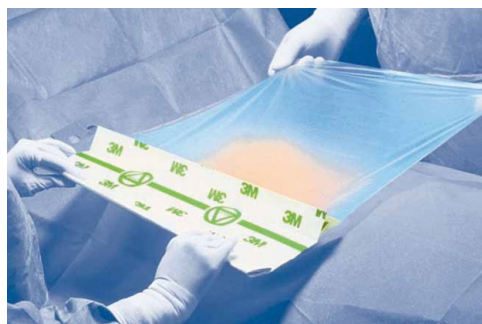

Silny klej i działanie antybakteryjne

3M™ Ioban™ 2 Antybakteryjne serwety do skracania przylegają pewnie do skóry, zmniejszając ryzyko odklejenia się. (Serwety, które odklejają się podczas operacji, mogą prowadzić do sześciokrotnego wzrostu zakażeń rany pooperacyjnej). Klej zaimpregnowany jodoforem w serwetach Ioban™ zapewnia szerokie, stałe skuteczne spektrum działania antybakteryjnego na krawędziach serwety i zmniejsza ryzyko zakażenia rany.

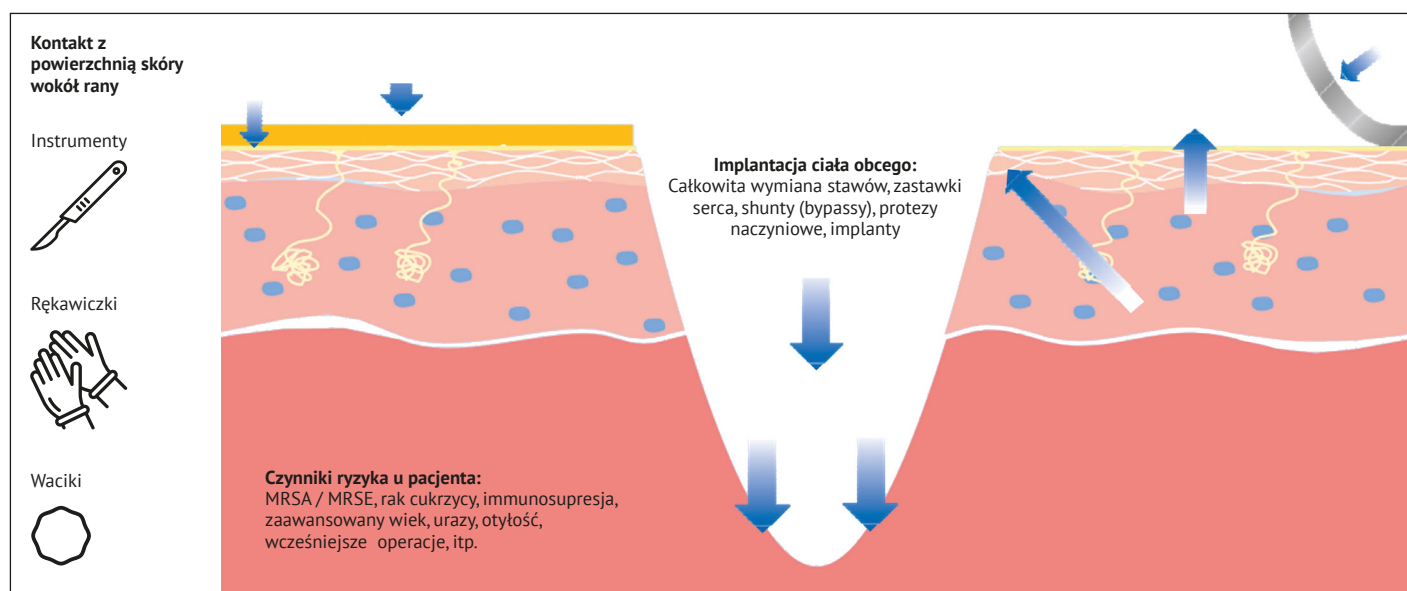

Skuteczna bariera bakteryjna – 3M™ Ioban™ 2


- ▶ Tworzy barierę ochronną i zmniejsza ryzyko przedostania się bakterii do rany operacyjnej
- ▶ Zapewnia stały kontakt ze skórą pacjenta – nawet w przypadku stosowania płynów do płukania
- ▶ Zapewnia ciągłe szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego na brzegach rany
- ▶ Przylega pewnie do skóry, aby zapobiec odklejaniu się serwety i zmywaniu środka antyseptycznego z powierzchni skóry
- ▶ Elastyczna folia dopasowuje się do konturów ciała i umożliwia manipulację kończynami
- ▶ Oddychająca i bezlateksowa ochrona na nacięcia

3M™ IOBAN™ 2 SERWETA OPERACYJNA – APLIKACJA

Aplikacja



Krok 1: Zdezynfekuj skórę zwykłym preparatem do skóry. Pozwól, aby środek do przygotowywania skóry całkowicie wyszeł.

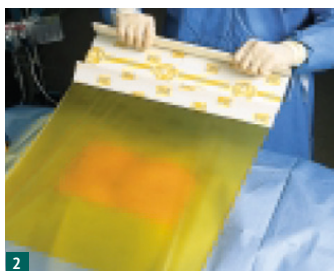

Krok 2: Z pomocą drugiej osoby, usuń wierzchnią warstwę 3M™ aż pojawi się znak ☉.



Krok 3: Przytrzymać serwetę nad planowanym miejscem nacięcia z odpowiednim naciągnięciem ale bez nadmiernego rozciągania.



Krok 4: Najpierw należy wygładzić serwetę wzdłuż wzdłuż planowanej linii nacięcia za pomocą sterylnego ręcznika.



Krok 5: Wygładź pozostałą część serwetę.

Usuwanie

Przed zamknięciem rany



Krok 1: Utwórz fałdę w serwecie poprzez ściśnięcie folii w pobliżu krawędzi nacięcia.



Krok 2: Pociągnij do góry za fałdę, oddzielając serwetę od skóry na krawędzi nacięcia, odstaniając do trzech centymetrów powierzchni skóry. Przystąp do zamykania.

Po zamknięciu



Krok 3: Przed zdjęciem serwetę należy najpierw przykryć nacięcie opatrunkiem.



Krok 4: Zdjąć serwetę z przymocowaną folią, składając serwetę o 180° z powrotem na siebie. Pociągnąć delikatnie, równomiernie napinając. Nie ciągnąć do góry. Aby usunąć serwetę do cięcia z serwet lnianych lub ręczników wielokrotnego użytku, należy zmoczyć materiał, a następnie odkleić serwetę od materiału.

Nazwy marek 3M™ Ioban™ są światowymi znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 3M.

